



Att förbereda en Infusion och göra tillsatser



Sprita händerna






Utrustning



Ordinationshandling, infusion, infusionsaggregat, ev. tillsatser, etikett
Spruta, kanyler, trevägskran
Sprit, kompresser och avfallsburk

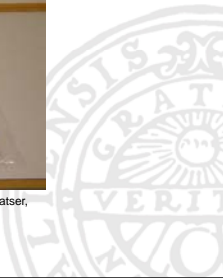



Förbered ev tillsats. Låt ampullen stå stadigt mot underlaget när du perforerar membranet. Anpassa sprustorleken till mängden läkemedel.





Dra upp ordinerad mängd läkemedel. För att underlätta vid uppdragning av läkemedel ur plastampull, använd handgrepp som på bilden.



Byt till ny kanyl.



Öppna ytterförpackningen till infusionen.



Vrid eller vicka bort förslutningen till den minsta öppningen åt den med pil inåt.



Injicera tillsatsen.



Fyll i etiketten.



Klistra fast etiketten så att påsens innehållsförteckning inte döljs.



Öppna infusionsaggregatet enl märkning. Om infusionen är i glasflaska – tänk på att ha aggregat med luftning.



Dra ner hela slangklämman några cm på slangen.



Stäng slangklämman genom att dra det vita hjulet ända ner.



Vrid eller vicka bort proppen till den stora öppningen/den med pil utåt.



Tag bort skyddet på aggregatets instickstagg.



Håll stadigt i infusions slang + päsens hals när du för in aggregatet med en vridande rörelse. Tänk på att arbeta aseptiskt!




Häng upp päsens.



Fyll droppkammaren genom att klämma ihop den och släppa efter. Fyll upp till strecket.



Öppna slangklämman och fyll upp hela slangen. Se till att det inte finns några luftbubblor.

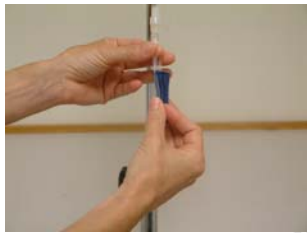

Fäst slangens nederdel i slangklämmans kant.



Fyll trevägskranen med NaCl.



Koppla ihop trevägskranen med infusionen. Stäng mot patienten när du är klar.



Kontrollera patientens id och gör förnyad kontroll av infusionen och dess tillsats mot ordinationshandlingen. Använd handskar. Ha alltid trevägskranen stängd in till patienten när du kopplar på infusionen.



Avlägsna den vita proppen genom att vrida på den.



Fixera pvk'n och stäng av k rlet f r att undvika bl dning. Koppla p  infusionsslangen.



St ng trev gskranen mot droppet och spola igenom pvk'n med 3-5 ml NaCl.



Justera droppakten genom att r kna antal droppar/min i droppkammaren.



Observationer o kontroller

Observera patienten och pvk´n med jämna mellanrum

Kontrollera droptakten med jämna mellanrum

Efter avslutad infusion – dokumentera tidpunkt på ordinationshandlingen

